




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

S Z Ú R Ó K

M A G Y A R ( H U )

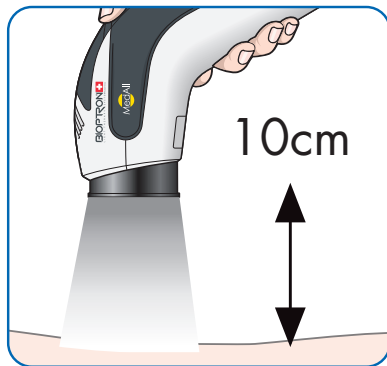

1



2



3



4

## HOGYAN HASZNÁLJA?

10 cm távolságból állítsa be a BIOPTRON készüléket a kívánt szűrővel úgy, hogy a készülék fénye lefedje a kezelendő területet (1. kép). Ha a színszűrő átmérőjénél nagyobb területeket kezel, akkor haladjon részterületenként és egy-egy területen tartsa be az ajánlott kezelési időt.

## HOGYAN CSERÉLJEN SZŪRŐT?

Óvatosan és erőltetés nélkül vegye le a cserélendő szűrőt (2. kép) és helyezze a helyére a kívánt színszűrőt a 3. képen látható módon. Ne a lencsét, hanem a szűrő külső gyűrűjét fogja meg.

## HOGYAN TISZTÍTSA A SZŪRŐKET? (4. kép)

1. Vegye le a szűrőt a készülékről a szűrő külső gyűrűjénél megfogva.
2. Használjon puha, nedves, szőszmentes törlőkendőt, hogy elkerülje az üvegfelület megkarcolását.
3. Szárítsa meg a szűrőt egy másik szőszmentes törlőkendővel.

## JÓTÁLLÁS

- 5 év (rendeltetésszerű használat és a figyelmeztetések betartása esetén)
- Ez a jótállás az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik.
- Ez a jótállás nem terjed ki a termék teljesítményét nem befolyásoló, a szokásos elhasználódásból eredő esztétikai elváltozásokra, illetve a termék helytelen használatából eredő károokra.

## FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne használjon semmilyen vegyszert (pl. izopropil-alkoholt) az üvegfelület és a szűrőgyűrű belső vagy külső oldalának tisztításához.
2. Tárolja a szűrőt védőtokban, hogy megakadályozza a por felhalmozódását és a napfénynek való kitettség miatti elszíneződést.
3. A szűrő törékeny üvegből készült, ezért bánjon vele körültekintően!
4. Ne távolítsa el a szűrő lencséjét a szűrő gyűrűjéből.



PMD-ME145-22-HU  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

M A G Y A R ( H U )