




**BIOPTRON®**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRAI

LIETUVIŲ (LT)

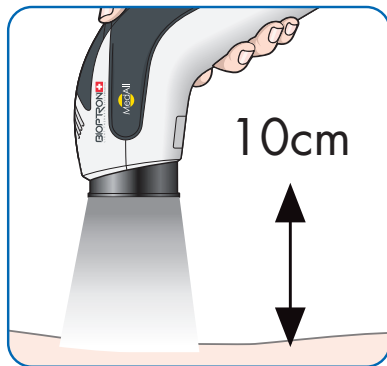

1



2



3



4

## NAUDOJIMAS

BIOPTRON prietaisą su norimu filtru laikykite 10 cm atstumu, kad skleidžiama šviesa apšviestų sritį, kurią norite gydyti (1 pav.). Jeigu plotas, kuriame atliekama procedūra, yra didesnis už spalvų filtro skersmenį, gydykite vieną plotą po kito, atsižvelgdami į rekomenduojamą laiką.

## FILTRO KEITIMAS

Atsargiai ir nenaudodami jėgos išimkite filtrą (2 pav.), kurį norite pakeisti, ir įdėkite norimos spalvos filtrą, kaip parodyta 3 pav. Keisdami filtrą, laikykite už išorinio filtro žiedo, o ne už lęšio.

## FILTRO VALYMAS (4 pav.)

1. Išimkite filtrą iš prietaiso, laikydami už išorinio filtro žiedo.
2. Valykite minkšta, drėgna, beplaušė šluoste, kad nesubraižytumėte stiklo paviršiaus.
3. Nusausinkite filtrą, naudodami kitą beplaušę šluostę.

## GARANTIJA

- 5 (penkeri) metai, jei prietaisas naudojamas pagal paskirtį ir laikomasi įspėjimų.
- Garantija taikoma medžiagų ir gamybos defektams.
- Garantija netaikoma prietaiso išvaizdos pakitimams, atsiradusiems dėl įprasto nusidėvėjimo, kurie neturi įtakos prietaiso veikimui, arba pažeidimams, susidariusiems netinkamai naudojant prietaisą.

## ĮSPĖJIMAI

1. Vidiniam ir išoriniams stiklo paviršiumi ir filtro žiedui valyti nenaudokite jokių cheminių medžiagų (pvz., izopropilo alkoholio).
2. Filtrą laikykite apsauginiame maišelyje, kad nesikauptų dulkės ir kad dėl saulės spindulių poveikio nepakistų jo spalva.
3. Filtras pagamintas iš trapaus stiklo, todėl su juo reikia elgtis atsargiai!
4. Naudotojui neleidžiama išimti filtro lęšio.



PMD-ME145-22-LT  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

LIETUVIŲ (LT)